



Bio **type**®  
Diagnostic GmbH

# Mentype® Nonaplex I

PCR Amplification Kit

## Gebrauchsanweisung

Das Mentype® **Nonaplex I** PCR Amplification Kit ist eine Multiplex-Anwendung für die in der DNA-Analyse-Datei (DAD) zu erfassenden Short Tandem Repeat (STR) Loci. In einem PCR-Ansatz werden die acht polymorphen STR-Loci **D3S1358**, **D8S1179**, **D18S51**, **D21S11**, **FGA (FIBRA)**, **SE33 (ACTBP2)**, **TH01 (TC11)** und **vWA** sowie der Geschlechtsmarker **Amelogenin** simultan amplifiziert.



100, 400, 1000



07. Mai 2018



41-09113-0100  
41-09113-0400  
41-09113-1000



Biotype Diagnostic GmbH  
Moritzburger Weg 67  
D-01109 Dresden  
Germany

Made in Germany

Die Biotype Diagnostic GmbH entwickelt, produziert und vertreibt PCR-basierte Anwendungen für die medizinische Diagnostik.

Für Informationen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website.

Tel.: +49 351 8838 400 (Mo. – Fr., 9 – 17 Uhr)

E-Mail: [support@biotype.de](mailto:support@biotype.de)

[www.biotype.de](http://www.biotype.de).

Unsere Mentype® Test Kits garantieren höchste Qualitätsstandards für Klinik und Forschung.

## Warenzeichen und Patente

Mentype<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Biotype Diagnostic GmbH.  
ABI PRISM<sup>®</sup>, GeneScan<sup>®</sup>, Genotyper<sup>®</sup> GeneMapper™ und Applied Biosystems sind eingetragene Warenzeichen der Applied Biosystems Inc.  
6-FAM, HEX, NED, ROX, POP-4 und Hi-Di sind Warenzeichen der Applied Biosystems Inc.  
GeneAmp<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen von Roche Molecular Systems.  
Die PCR ist patentrechtlich geschützt. Patentinhaber sind die Firmen Roche Molecular Systems und F. Hoffmann-La Roche (Roche).  
GenBank<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen vom National Institute of Health.

NOTICE TO PURCHASER: LIMITED LICENSE

This product is sold under licensing arrangements between Licensee and Life Technologies Corporation. The purchase price of this product includes limited, nontransferable rights under certain U.S. and foreign patent(s) owned by Life Technologies Corporation to use only this amount of the product to practice the claims in said patents solely for activities of the purchaser in the field of human or animal identification. No other rights are conveyed. Further information on purchasing licenses under the above patents may be obtained by contacting the Licensing Department, Life Technologies Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008. Email: [outlicensing@lifetech.com](mailto:outlicensing@lifetech.com).

## Warnungen und Sicherheitshinweise

Folgende potenziell gefährliche Substanz ist in diesem PCR Amplifikation Kit enthalten:

<b>Kitbestandteil</b>	<b>Chemikalie</b>	<b>Gefahr</b>
Primergemisch, Reaktionsgemisch und Allelleiter	Natriumazid NaN <sub>3</sub>	giftig beim Verschlucken, entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Für Biotype<sup>®</sup> Kitkomponenten sind die Sicherheitsdatenblätter bei uns erhältlich. Für Sicherheitsdatenblätter von Reagenzien, die nicht im Testkit enthalten sind, kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Hersteller.

© Biotype Diagnostic GmbH, alle Rechte vorbehalten.

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Produktbeschreibung.....	5
2. Protokolle für die Amplifikation und Elektrophorese.....	8
2.1 PCR Amplifikation .....	8
2.2 Elektrophorese am ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer .....	10
2.3 Elektrophorese am ABI PRISM® 3130/3130xl Genetic Analyzer .....	15
3. Auswertung .....	22
4. Biotype® Auswertevorlagen.....	23
5. Kontrollen .....	24
6. Fragmentlängen und Allele .....	24
7. Interpretation der Ergebnisse .....	30
8. Referenzen .....	31

## 1. Produktbeschreibung

Das Mentype® **Nonaplex I** PCR Amplifikation Kit ist eine Multiplex-Anwendung für die in der DNA-Analyse-Datei (DAD) zu erfassenden Short Tandem Repeat (STR) Loci. In einem PCR-Ansatz werden die acht polymorphen STR-Loci **D3S1358**, **D8S1179**, **D18S51**, **D21S11**, **FGA (FIBRA)**, **SE33 (ACTBP2)**, **TH01 (TC11)** und **vWA** sowie der Geschlechtsmarker **Amelogenin** simultan amplifiziert.

Das Testkit wurde speziell für die schnelle und zuverlässige Erstellung von DNA-Befunden aus Blutproben bzw. Abstrichen der Wangenschleimhaut von Vergleichspersonen sowie aus Spuren entwickelt. Die Primer sind mit den Fluoreszenzfarbstoffen **6-FAM** (Amelogenin, D3S1358, TH01 und SE33), **HEX** (vWA, FGA und D18S51) oder **NED** (D8S1179 und D21S11) markiert. Bei der Zusammenstellung des Primergemisches wurde besonders auf eine ausgewogene Signalintensität der einzelnen DNA-Systeme geachtet. Für die Untersuchung seltener, großer FGA Allele (42.2-51.2) empfehlen wir die Verwendung des Mentype® **Nonaplex**<sup>OS</sup>.

Die Nachweisgrenze für das Mentype® **Nonaplex I** Testkit liegt bei weniger als **200 pg genomischer DNA**. Wir empfehlen den Einsatz von **0.5-1.0 ng DNA**.

Die Validierung und Evaluierung des Testkits wurden am GeneAmp® 9700 Thermocycler, ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer und ABI PRISM® 3100/3130 Genetic Analyzer durchgeführt.

**Tabelle 1. Locus-spezifische Informationen für Mentype® Nonaplex I**

<b>Locus</b>	<b>GenBank® Accession</b>	<b>Repeatmotiv des Referenz Alleles</b>	<b>Referenz Allel</b>	<b>Allel- Bereich</b>
Amelogenin X	M55418			
Amelogenin Y	M55419			
D3S1358	11449919	TCTA [TCTG] <sub>2</sub> [TCTA] <sub>15</sub>	18	8-26
D8S1179	G08710	[TCTA] <sub>12</sub>	12	6-21.2
D18S51	L18333	[AGAA] <sub>13</sub>	13	5.3-42
D21S11	AP000433	[TCTA] <sub>4</sub> [TCTG] <sub>6</sub> [TCTA] <sub>3</sub> TA [TCTA] <sub>3</sub>	29	12-46
FGA (FIBRA)	M64982	TCA [TCTA] <sub>2</sub> TCCATA [TCTA] <sub>11</sub> [TTTC] <sub>3</sub> TTTTTTCT [CTTT] <sub>13</sub> CTCC [TTCC] <sub>2</sub>	21	12.2-51.2
SE33 (ACTBP2)	NG000840	[AAAG] <sub>9</sub> AA [AAAG] <sub>16</sub>	25.2	3-50
TH01 (TC11)	D00269	[TCAT] <sub>9</sub>	9	3-14
vWA	M25858	TCTA [TCTG] <sub>4</sub> [TCTA] <sub>13</sub>	18	10-26

Tabelle 1 zeigt die STR Loci mit ihren Repeatmotiven und Allelen. Die Nomenklatur entspricht den Leitlinien der International Society for Forensic Genetics (ISFG, Bär et al. (1997). Der angegebene Allelbereich berücksichtigt die bekannten Allele des National Institute of Standards and Technology (NIST, Stand 12/2008) sowie die aktuelle Literatur.

## **Tabelle 2. Chromosomale Kartierung für Mentype® Nonaplex I**

<b>Locus</b>	<b>Chromosomale Kartierung</b>
Amelogenin X	Xp22.1-22.3
Amelogenin Y	Yp11.2
D3S1358	3p25.3
D8S1179	8q23.1-23.2
D18S51	18q21.3
D21S11	21q21.1
FGA (FIBRA)	4q28.2
SE33	6q14.2
TH01	11p15.5pter
vWA	12p13.31

### **Inhalt**

#### **Mentype® Nonaplex I PCR Amplification Kit (100 Reaktionen)**

Nuklease-freies Wasser / Nuclease-free water	3.0 mL
Reaktionsgemisch <b>A</b> / Reaction mix <b>A</b>	500 µL
Primergemisch / Primer mix	250 µL
DNA Polymerase / DNA polymerase	40 µL
Kontroll-DNA XY1 / Control DNA XY1 (2 ng/µL)	10 µL
DNA Längenstandard 550 / DNA Size Standard 550 (ROX)	50 µL
Allelleiter / Allelic ladder	10 µL

### **Lagerung**

Die Lagerung über einen längeren Zeitraum empfehlen wir bei –20°C. Wiederholtes Auftauen und Einfrieren sollte vermieden werden. Das Primergemisch und die Allelleiter sollten lichtgeschützt aufbewahrt werden. Die DNA-Proben und post-PCR Reagenzien (Allelleiter und DNA-Längenstandard) sollten getrennt von den PCR Reagenzien gelagert werden. Die Haltbarkeit des Testkits ist auf dem Verpackungsetikett angegeben.

### **Qualitätssicherung**

Der gesamte Inhalt des Testkits wird einer intensiven Qualitätssicherung durch die Biotype Diagnostic GmbH unterzogen. Die Qualität der Testkits wird kontinuierlich überprüft, um die uneingeschränkte Verwendbarkeit zu belegen. Bitte kontaktieren Sie uns in allen Fragen zur Qualitätssicherung.

## Zusätzliche Reagenzien

Für die Amplifikation und Probenvorbereitung benötigen Sie neben den im Biotype® Testkit enthaltenen Bestandteilen folgende Reagenzien:

<b>Reagenz</b>	<b>Lieferant</b>	<b>Bestellnummer</b>
Hi-Di™ Formamide, 25 mL	Applied Biosystems	4311320
Matrix Standards DS-30 für ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer	Applied Biosystems	401546 und 402996 (NED)
Matrix Standards DS-30 für ABI PRISM® multi-capillary instruments	Applied Biosystems	4345827

## 2. Protokolle für die Amplifikation und Elektrophorese

### 2.1 PCR Amplifikation

#### Ansatz des Master Mixes

Die folgende Tabelle zeigt die Volumina der eingesetzten PCR Reagenzien bei 1.0 µL Probenvolumen (Template-DNA) in einem Reaktionsvolumen von 25 µL.

Berücksichtigen Sie bei der Anzahl der PCR-Reaktionen die Positiv- und Negativkontrolle. Fügen Sie zu dieser Zahl ein oder zwei Reaktionen hinzu, um Pipettierfehler zu kompensieren.

Komponente	Volumen
Nuklease-freies Wasser	16.1 µL
Reaktionsgemisch <b>A*</b>	5.0 µL
Primergemisch	2.5 µL
Taq DNA Polymerase (hot start, 2.5 U/µL)	0.4 µL
Volumen des Master Mixes	24.0 µL

\* enthält Mg<sup>2+</sup>, dNTPs, BSA

Alle Reagenzien sollten vor dem Ansetzen des Master Mixes gemischt (Vortex) und kurz zentrifugiert werden (ca. 10 s).

Die Menge der einzusetzenden DNA richtet sich nach ihrer Konzentration. Für Vergleichsproben ist meist 1 µL ausreichend. Für Spurenproben können 5 µL notwendig sein. Eine weitere Erhöhung der DNA-Menge über 5 µL hinaus ist nicht empfehlenswert, da enthaltene PCR-Inhibitoren u.U. nicht hinreichend ausverdünnt werden. Die Menge an Nuklease-freiem Wasser ist entsprechend zu korrigieren, sodass das Gesamtvolumen des PCR-Ansatzes immer 25 µL beträgt.

Lagern Sie Ihre DNA-Proben in Nuklease-freiem Wasser oder in verdünntem TE Puffer (10 mM Tris HCl, pH 8.0 und 1 mM EDTA), z.B. 0.1x TE Puffer.

Die Primergemische sind so eingestellt, dass bei **30 PCR-Zyklen** mit **0.5 ng Kontroll-DNA XY1** in einem Reaktionsvolumen von 25 µL ausgewogene Peakhöhen erreicht werden. Wird mehr Template-DNA eingesetzt, so sind bei kleinen PCR-Fragmenten sehr hohe Peaks und bei größeren PCR-Fragmenten verhältnismäßig niedrige Peaks zu erwarten. Reduzieren Sie die DNA-Menge, um diese Uausgewogenheit zu korrigieren.

#### Positivkontrolle

Für die Positivkontrolle verdünnen Sie die Kontroll-DNA XY1 auf 0.5 ng in dem entsprechenden Volumen. Pipettieren Sie die verdünnte Kontroll-DNA anstelle der Template-DNA in die Reaktionsgefäße mit dem vorgelegten PCR Master Mix.

#### Negativkontrolle

Als Negativkontrolle pipettieren Sie Nuklease-freies Wasser an Stelle der Template-DNA in die Reaktionsgefäße mit dem vorgelegten PCR Master Mix.



## PCR Amplifikationsparameter

Um die Taq DNA Polymerase zu aktivieren und die Bildung von unspezifischen Amplifikationsprodukten zu unterdrücken, sollte unbedingt ein „hot start“ durchgeführt werden.

Die Zyklenzahl ist abhängig von der DNA-Menge. Für alle Proben werden 30 PCR-Zyklen empfohlen. Für kritisches Spurenmaterial (< 100 pg DNA) werden optional 34 Zyklen empfohlen, um optimale Signalintensitäten zu erreichen.

## Standard Methode

empfohlen für alle DNA-Proben

Temperatur	Zeit	
94°C	4 min (hot start für Aktivierung der Multi Taq2 DNA Polymerase)	
94°C	30 s	
58°C	120 s	<b>30 Zyklen</b>
72°C	75 s	
68°C	60 min	
10°C	∞	bis zum Ende

## Optional

empfohlen für Spurenproben mit geringen DNA-Mengen

Temperatur	Zeit	
94°C	4 min (hot start für Aktivierung der Multi Taq2 DNA Polymerase)	
94°C	30 s	
58°C	120 s	<b>34 Zyklen</b>
72°C	75 s	
68°C	60 min	
10°C	∞	bis zum Ende

Aufgrund zu geringer DNA-Mengen kann es zu statistischen Ausfällen (Allelic Dropouts) und unausgewogenen Peakhöhen kommen. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit von unspezifischen Amplifikationsprodukten. Mit zunehmender Zyklenzahl können zudem Kreuzkontaminationen durch minimale Mengen an Fremd-DNA auftreten.

## 2.2 Elektrophorese am ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer

Allgemeine Anweisungen zum Analysegerät, der Matrixerstellung und der Anwendung der GeneScan® bzw. GeneMapper™ ID Software können der entsprechenden Anleitung *ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer User's Manual* entnommen werden. Im Folgenden wird die Elektrophorese mit der GeneScan® Software beschrieben.

Für den kombinierten Einsatz der vier Fluoreszenzfarbstoffe **6-FAM, HEX, NED** und **ROX** (auch **DS-30** genannt) ist von Applied Biosystems die Nutzung des virtuellen **Filter Sets D** vorgesehen. Grundsätzlich jedoch sind die Filter Sets A und F ebenfalls geeignet.

### Material

Kapillare	47 cm / 50 µm (grün)
Polymer	POP-4 for 310 Genetic Analyzer
Puffer	10x Genetic Analyzer Buffer with EDTA

## Matrixerstellung

Vor der Durchführung der Fragmentlängenanalyse mit dem Filter Set D muss zunächst eine Matrix mit PCR-Fragmenten der entsprechenden vier Fluoreszenzfarbstoffe 6-FAM, HEX, NED und ROX für das jeweilige Analysegerät erstellt werden. Den geeigneten Matrix Standard erhalten Sie von Applied Biosystems.

Farbe	Matrix Standard	Bestellnummer
Blau (B)	6-FAM	Applied Biosystems, 401546
Grün (G)	HEX	Applied Biosystems, 401546
Gelb (Y)	NED	Applied Biosystems, 402996
Rot (R)	ROX	Applied Biosystems, 401546

Zur Erstellung von geeigneten Matrix Files werden vier Elektrophoresen unter den gleichen Bedingungen ausgeführt, wie sie auch für Proben und Allelleitern des Biotype® Testkits gelten. Für die vier verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffe 6-FAM, HEX, NED und ROX muss jeweils ein eigener Elektrophoreselauf durchgeführt werden.

Matrix Probe	Komponente	Volumen
Matrix Probe 1	Hi-Di™ Formamide	12.0 µL
	Matrix Standard <b>6-FAM</b>	1.0 µL
Matrix Probe 2	Hi-Di™ Formamide	12.0 µL
	Matrix Standard <b>HEX</b>	1.0 µL
Matrix Probe 3	Hi-Di™ Formamide	12.0 µL
	Matrix Standard <b>NED</b>	1.0 µL
Matrix Probe 4	Hi-Di™ Formamide	12.0 µL
	Matrix Standard <b>ROX</b>	1.0 µL

- 3 min denaturieren bei 95°C
- abkühlen auf 4°C
- gesamten Probenansatz zur Analyse auf Tray laden

- Probenliste **Sample Sheet** erstellen und Proben bezeichnen


## Injektionsliste für die Matrixerstellung

Parameter	Einstellung
Module File	GS STR POP-4 (1 mL) D
Matrix File	<b>NONE</b>
Size Standard*	<b>NONE</b>
Injection [s]	5
Injection [kV]	15.0
Run [kV]	15.0
Run [°C]	60
Run Time [min]	24

\* Matrix Standards sind immer **ohne DNA-Längenstandard (ROX)** vorzubereiten

## Analyse der Matrix Proben

- Starten der GeneScan® Software
- **File** → **New** → **Project** (Ordner des entsprechenden Laufs öffnen)  
→ **Add Sample Files**
- Markieren der Matrix Probe in der Spalte **Sample File**
- **Sample** → **Raw Data**
- Bewerten, ob eine stabile Basislinie vorhanden ist. Wie in der Abbildung gezeigt sollten mindestens fünf Peaks mit Peak-Höhen von 1000-4000 (Y-Achse) in jeder Matrix Probe erkennbar sein (optimaler Bereich: 2000-4000)

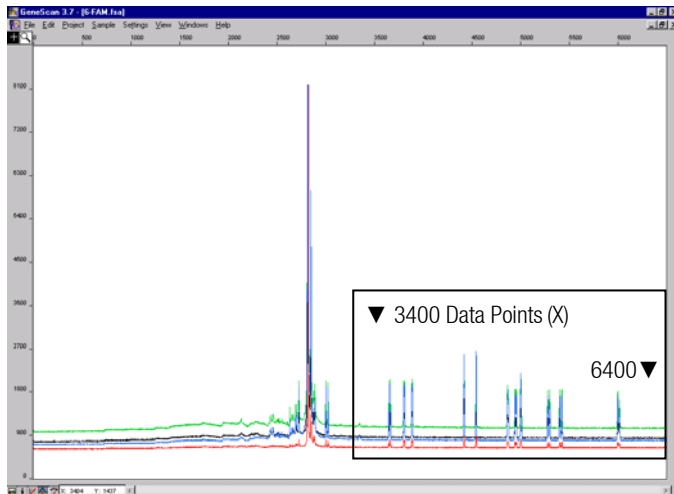

**Abb. 1** Elektropherogramm der Rohdaten des Matrix Standards 6-FAM

- Auswahl des Analysebereichs mit stabiler, ebener Basislinie
- Falls notwendig, injizieren Sie die Matrix Probe noch einmal
- Notieren von Anfangs- und Endpunkten (Data Points) des Auswahlbereiches, z.B. Anfangswert 3400, Endwert 6400
- Differenzwert berechnen, z.B.  $6400 - 3400 = 3000$  Data Points

## Neue Matrix erstellen

- **File** → **New** → **Matrix**

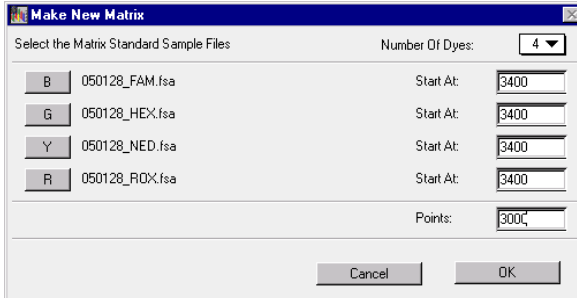


Abb. 2 Matrix Proben auswählen

- Matrix Proben für jede Farbe (B, G, Y, R) importieren
- Jeweiligen Anfangspunkt bei **Start At** eintragen, z.B. 3400
- Errechneten Differenzwert z.B. 3000 bei **Points** eintragen
- Nach der Bestätigung mit **OK** wird die neue Matrix berechnet

Matrix Biotype D.mtx

Reactions

	B	G	Y	R
B	1.0000	0.4164	0.0415	0.0012
G	0.8472	1.0000	0.6863	0.0107
Y	0.4509	0.4886	1.0000	0.0456
R	0.1273	0.1792	0.4964	1.0000

Abb. 3 Neue Matrix DS-30

- Speichern im Matrix Ordner: **File** → **Save As**, z.B. Matrix DS-30

## Matrix prüfen

Bitte überprüfen Sie die neue Matrix mit Ihren aktuellen Proben.

- **File** → **New** → **Project** (Ordner des entsprechenden Laufs öffnen)  
→ **Add Sample Files**
- Markieren Sie die aktuelle Probe in der Spalte **Sample File**
- **Sample** → **Install New Matrix**  
(Matrix Ordner öffnen und neue Matrix auswählen)
- Proben neu analysieren

Mit der neuen Matrix sollten **keine** Überstrahlungen (Pull-up Peaks) zwischen den verschiedenen Farbpanelen (B, G, Y, R) auftreten.

## Probenvorbereitung

Komponente	Volumen
Hi-Di™ Formamide	12.0 µL
DNA-Längenstandard 550 (ROX)	0.5 µL
<hr/>	
12 µL Gemisch (Formamid+ Längenstandard) für alle Proben vorlegen	
1 µL PCR-Produkt (ggf. verdünnt) bzw. Allelleiter zugeben	
<hr/>	
- 3 min denaturieren bei 95°C	
- abkühlen auf 4°C	
- gesamten Probenansatz zur Analyse auf Tray laden	

## Signalintensitäten

Möglichkeiten zur Erhöhung der Signalintensitäten:

- Reduzierung der Anteile am DNA-Längenstandard 550 (ROX) auf Peakhöhen von ca. 500 relativen Fluoreszenzeinheiten (RFU)
- Aufreinigung der PCR-Produkte vor der Analyse

## Einstellung der GeneScan® Software

- Probenliste **Sample Sheet** erstellen und Proben bezeichnen

## Injektionsliste

Parameter	Einstellung
Module File	GS STR POP-4 (1 mL) <b>D</b>
Matrix File	z.B. Matrix DS-30
Size Standard	z.B. SST-ROX_50-400bp
Injection [s]*	5
Injection [kV]	15.0
Run [kV]	15.0
Run [°C]	60
Run Time [min]**	<b>26</b>

\* Abweichend von der Standardeinstellung kann die Injektionszeit je nach Probe zwischen 1 und 10 s betragen. Handelt es sich um Vergleichsproben mit sehr hohen Peakhöhen, so kann zur Vermeidung von Überstrahlungen eine kürzere Injektionszeit gewählt werden. Bei Spurenproben können bis zu 10 s notwendig sein.

\*\* Abhängig von den Analysebedingungen ist die Run Time für Mentype® **Nonaplex I** angepasst worden, damit Fragmente bis zu einer Länge von **400 bp** analysiert werden können.

## Analyse Parameter

Die empfohlenen Analyse Parameter sind:

Analysis Range	Start: 2000 Stop: 10000
Data Processing	Baseline: Checked Multicomponent: Checked Smooth Options: Light
Peak Detection	Peak Amplitude Thresholds B:* Y:* G:* R:* Min. Peak Half Width: 2 pts Polynomial Degree: 3 Peak Window Size: 11 pts**
Size Call Range	Min: 50 Max: 550
Size Calling Method	Local Southern Method
Split Peak Correction	None

\* Der Grenzwert der Peakamplituden (threshold) ist die minimale Peakhöhe, welche die GeneScan® bzw. GeneMapper™ ID Software als einen Peak erkennt. Übliche Werte sind 50-200 RFU und sollten individuell vom Analyselabor festgelegt werden. Empfehlung: Die minimale Peakhöhe sollte mindestens 3x so hoch sein wie das Grundrauschen der Basislinie.

\*\* Gelegentlich können Punktallele, d.h. Allele mit einem Abstand von mindestens 1 bp zum nächsten ganzzahligen Allel, nicht unterschieden werden. Falls notwendig kann die Peak Window Size noch weiter verringert werden.

### 2.3 Elektrophorese am ABI PRISM® 3130/3130xl Genetic Analyzer

Allgemeine Anweisungen zum Analysegerät, zur Spektralkalibrierung und der Anwendung der ABI PRISM® Data Collection Software Version 3.0 und der GeneMapper™ ID Software können der entsprechenden Anleitung *ABI PRISM® 3130/3130xl Genetic Analyzers Getting Started Guide* entnommen werden.

Das 4-Kapillarsystem trägt die Bezeichnung ABI 3130 (zuvor ABI 3100-Avant), das 16-Kapillarsystem ABI 3130xl (zuvor ABI 3100).

Für den kombinierten Einsatz der vier Fluoreszenzfarbstoffe **6-FAM, HEX, NED** und **ROX** (auch **DS-30** genannt) ist die Verwendung des **Dye Set D** vorgesehen.

#### Material

Kapillare	36 cm Capillary Array for 3130/3130xl
Polymer	POP-4 Polymer for 3130
Puffer	10x Genetic Analyzer Buffer with EDTA

#### Spektralkalibrierung / Matrixerstellung

Vor der Durchführung der Fragmentlängenanalyse im Dye Set D muss zunächst eine Spektralkalibrierung mit PCR-Fragmenten der entsprechenden vier Fluoreszenzfarbstoffe 6-FAM, HEX, NED und ROX für das jeweilige Analysegerät durchgeführt werden. Auf diese Weise wird eine Matrix erstellt, die das Überlappen der farbspezifischen Fluoreszenzemissionsspektren korrigiert.

Die Spektralkalibrierung gliedert sich in die folgenden Abschnitte:

- Vorbereitung der Matrix Standards zur Spektralkalibrierung
- Laden der Standards in die 96-Lochplatte (je Kapillare eine Probe)
- Erstellung des Instrument Protocol zur Spektralkalibrierung (Protocol Manager)
- Plattenzusammensetzung im Platteneditor festlegen (Plate Manager)
- Durchführung des Laufs zur Spektralkalibrierung und prüfen der Matrix

## Vorbereitung der Matrix Standards zur Spektralkalibrierung

Beispiel für 4 Kapillaren/ABI 3130

Komponente	Volumen
Hi-Di™ Formamide	47.5 µL
Matrix Standard DS-30	2.5 µL

- 12 µL des Gemisches in 96-Lochplatte laden, z.B. Position **A1-D1**
- 3 min denaturieren bei 95°C
- abkühlen auf 4°C

Beispiel für 16 Kapillaren/ABI 3130xl

Komponente	Volumen
Hi-Di™ Formamide	190.0 µL
Matrix Standard DS-30	10.0 µL

- 12 µL des Gemisches in 96-Lochplatte laden, z.B. Position **A1-H1** und **A2-H2**
- 3 min denaturieren bei 95°C
- abkühlen auf 4°C

## Durchführung der Spektralkalibrierung

- Die vorbereitete 96-Lochplatte in den Autosampler setzen
- Im **Protocol Manager** der Data Collection Software im Fenster **Instrument Protocol** auf **New** klicken, um den **Protocol Editor** zu öffnen

## Instrument Protocol zur Spektralkalibrierung

Protocol Editor	Einstellung
Name	User (z.B. Spectral36_POP4_DS30)
Type	SPECTRAL
Dye Set	D
Polymer*	User (z.B. POP4)
Array Length*	User (z.B. 36cm)
Chemistry	Matrix Standard
Run Module*	User (z.B. Spect36_POP4_1)

\* Richtet sich nach dem verwendeten Polymertyp und der Kapillarlänge

- **OK** wählen, um den **Protocol Editor** zu verlassen
- Im **Plate Manager** der Data Collection Software auf **New** klicken, um **New Plate Dialog** zu öffnen

## Platteneditor zur Spektralkalibrierung (I)

New Plate Dialog	Einstellung
Name	z.B. Spectral_DS-30_Datum
Application	Spectral Calibration
Plate Type	96-Well
Owner Name / Operator Name	...


- **OK** wählen. Auf diese Weise öffnet sich automatisch eine neue Tabelle im Platteneditor



## Platteneditor zur Spektralkalibrierung (II)

Parameter	Einstellung
Sample Name	Benennung der Matrixproben
Priority	z.B. 100
Instrument Protocol 1	Spectral36_POP4_DS30 (Einstellung zuvor beschrieben)

- In die oberste Zelle der Tabelle klicken, um die gesamte Spalte auszuwählen, über **Edit** → **Fill Down** diese Information den ausgewählten Matrixproben zufügen und mit **OK** bestätigen
- In **Run Schedule** → **Find All** anklicken, dann **link** wählen, um die 96-Lochplatte auf dem Autosampler mit der soeben erstellten Plattenbezeichnung zu verknüpfen (Position A oder B). Anschließend den Lauf starten

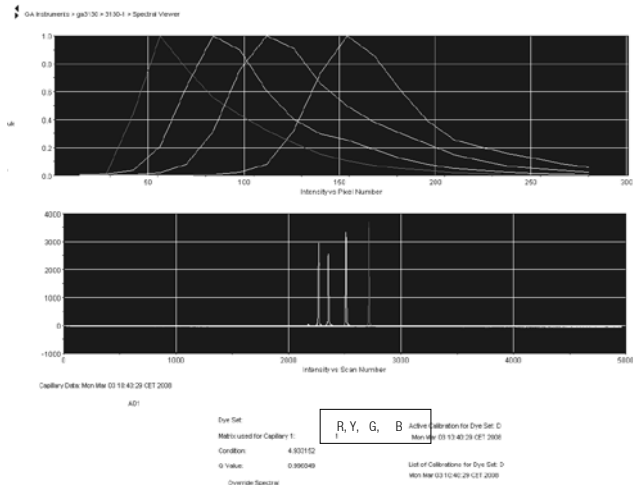

**Abb. 4** Elektropherogramm der Spektralkalibrierung mit Matrix Standards DS-30 am ABI 3130

## Matrix prüfen

- Jede Kapillare sollte einen Qualitätswert (**Q Value**) von mindestens 0.95 sowie eine Konditionszahl (**Condition number range**) zwischen 1 und 20 haben
- Bewerten, ob eine stabile Basislinie vorhanden ist. Es müssen vier Peaks mit Peakhöhen von 1000-5000 (Y-Achse) in jeder Kapillare erkennbar sein (optimaler Bereich: 2000-4000), siehe Abbildung
- Bitte überprüfen Sie die neue Matrix mit Ihren aktuellen Proben. Mit der neuen Matrix sollten **keine** Überstrahlungen (Pull-up Peaks) zwischen den verschiedenen Farbpanels (B, G, Y, R) auftreten.
- War die Kalibrierung nicht erfolgreich, ist eine Wiederholung der Spektralkalibrierung mit optimierten Werten notwendig
- Haben alle Kapillaren die Kalibrierung erfolgreich durchlaufen, wird die Kalibrierungsdatei für **DyeSetD** im **Spectral Viewer** automatisch aktiv gesetzt. Eine Umbenennung ist über **Rename** möglich (z.B. DS-30\_Datum der Kalibrierung)

## Probenvorbereitung

Komponente	Volumen
Hi-Di™ Formamide	12.0 µL
DNA-Längenstandard 550 (ROX)	0.5 µL
<hr/>	
12 µL Gemisch (Formamid+ Längenstandard) für alle Proben vorlegen	
1 µL PCR-Produkt (ggf. verdünnt) oder Allelleiter zugeben	
<hr/>	
- 3 min denaturieren bei 95°C	
- abkühlen auf 4°C	
- gesamten Probenansatz zur Analyse auf Tray laden	

Da die Injektion gleichzeitig an allen Kapillaren stattfindet, müssen am Mehrkapillargerät immer 4 oder 16 Proben auf der Platte pipettiert werden. Falls weniger Proben zu messen sind, müssen die entsprechenden Positionen mit 12 µL Hi-Di™ Formamide aufgefüllt werden.

Um eine sichere Allelzuordnung am Mehrkapillargerät zu gewährleisten, sollten unabhängig von der Probenanzahl mehrere Allelleitern mitlaufen.

Die Raumtemperatur kann das Laufverhalten der PCR-Produkte an Mehrkapillargeräten stark beeinflussen und bei zu geringer Temperatur zum Auftreten von Doppelpeaks (Split Peaks) führen. Unter Umständen nimmt die Temperatur auch Einfluss auf die Laufgeschwindigkeit der Fragmente. Bitte achten Sie darauf, dass die vom Gerätehersteller empfohlene Arbeitstemperatur eingehalten wird.

## Signalintensitäten

Möglichkeiten zur Erhöhung der Signalintensitäten:

- Reduzierung der Anteile am DNA Längenstandard 550 (ROX) auf Peakhöhen von ca. 500 relativen Fluoreszenzeinheiten (RFU)
- Aufreinigung der PCR-Produkte vor der Analyse

## Einstellung der GeneMapper™ ID Software

Vor dem ersten Probenlauf muss das Run Modul wie folgt editiert werden:

- Im **Module Manager** der Data Collection Software auf **New** klicken, um den **Run Module Editor** zu öffnen

### Run Module 3kV\_10s\_450bp

Parameter	Einstellung
Oven Temperature [°C]	Default
Poly Fill Volume	Default
Current Stability [µA]	Default
PreRun Voltage [kV]	Default
PreRun Time [s]	Default
Injection Voltage [kV]	<b>3.0</b>
Injection Time [s]*	<b>10</b>
Voltage Number of Steps	Default
Voltage Step Interval	Default
Data Delay Time [s]	Default
Run Voltage [kV]	Default
Run Time [s]**	<b>1320</b>

\* Abweichend von der Standardeinstellung kann die Injektionszeit je nach Probe zwischen 1 und 20 s betragen. Handelt es sich um Vergleichsproben mit sehr hohen Peakhöhen, kann zur Vermeidung von Überstrahlungen eine kürzere Injektionszeit gewählt werden. Bei Spurenproben können bis zu 20 s notwendig sein.

\*\* Abhängig von den Analysebedingungen ist die Run Time für Mentype® **Nonaplex I** angepasst worden, damit Fragmente bis zu einer Länge von **400 bp** analysiert werden können.

- Auf **Save As** klicken, den Namen des neuen Moduls eingeben (z.B. 3kV\_10s\_450bp) und mit **OK** bestätigen
- Zum Verlassen des **Run Module Editors** auf **Close** klicken

### Run starten

- Die vorbereitete 96-Lochplatte in den Autosampler setzen
- Im **Protocol Manager** der Data Collection Software im Fenster **Instrument Protocol** auf **New** klicken, um den **Protocol Editor** zu öffnen

### Instrument Protocol

Protocol Editor	Einstellung
Name	z.B. Run36_POP4_DS-30_22min
Type	REGULAR
Run Module*	3kV_10s_450bp
Dye Set	D

\* Parameter siehe oben

- **OK** wählen, um den Protokollreditor zu verlassen

Vor jedem Probenlauf muss die zu messende Platte wie folgt angelegt werden:

- Im **Plate Manager** der Data Collection Software auf **New** klicken, um **New Plate Dialog** zu öffnen

### GeneMapper™ Plattenditor (I)

New Plate Dialog	Einstellung
Name	z.B. Plate_DS-30_Datum
Application	wählen Sie GeneMapper Application
Plate Type	96-Well
Owner Name / Operator Name	...

- **OK** wählen. Auf diese Weise öffnet sich automatisch eine neue Tabelle im Plattenditor

### GeneMapper™ Plattenditor (II)

Parameter	Einstellung
Sample Name	Benennung der Probe
Priority	z.B. 100 (Voreinstellung)
Sample Type	Probe oder Allelleiter
Size Standard	z.B. SST-ROX_50-400bp
Panel	z.B. Biotype_Panels_v3a (Testkit auswählen)
Analysis Method	z.B. Analysis_HID_3130
Snp Set	-
User-defined 1-3	-
Results Group 1	(Results Group auswählen)
Instrument Protocol 1	Run36_POP4_DS-30 (Einstellung zuvor beschreiben)

- In die obersten Zellen der Tabelle klicken, um die gesamte Spalte auszuwählen, über **Edit** → **Fill Down** diese Informationen den ausgewählten Proben zufügen und mit **OK** bestätigen
- In **Run Schedule** → **Find All** anklicken, dann auf **link** klicken, um die 96-Lochplatte auf dem Autosampler mit der soeben erstellten Plattenbezeichnung zu verknüpfen (Position A oder B). Anschließend den Lauf starten
- Die Qualität der Rohdaten kann während des Laufs für jede einzelne Kapillare im **Capillaries Viewer** oder **Cap/Array Viewer** beobachtet werden. Mögliche Fehlermeldungen (**Error Status**) erscheinen in **Event Log**
- Die Daten des Probenlaufs werden unter **Run History** oder **Cap/Array Viewer** der Data Collection Software im Überblick dargestellt. Die Laufdaten der Proben werden im **Run Folder** der zuvor gewählten **Results Group** abgelegt

## Analyse Parameter / Analysis Method

Die empfohlenen Einstellungen im Tabellenblatt Peak Detector sind:

Peak Detection Algorithm	Advanced
Ranges	Analysis: Partial Range Start Pt: 2000; Stop Pt: 10000 Sizing: All Sizes
Smoothing and Baselineing	Smoothing: Light Baseline Window: 51 pts
Size Calling Method	Local Southern Method
Peak Detection	Peak Amplitude Thresholds B:* Y:* G:* R:* Min. Peak Half Width: 2 pts Polynomial Degree: 3 Peak Window Size: 11 pts** Slope Thresholds: 0.0


\* Der Grenzwert der Peakamplituden (threshold) ist die minimale Peakhöhe, welche die GeneMapper™ ID Software als einen Peak erkennt. Übliche Werte sind 50-200 RFU und sollten individuell vom Analyselabor festgelegt werden. Empfehlung: Die minimale Peakhöhe sollte mindestens 3x so hoch sein wie das Grundrauschen der Basislinie.

\*\* Gelegentlich können Punktallele, d.h. Allele mit einem Abstand von mindestens 1 bp zum nächsten ganzzahligen Allel, nicht unterschieden werden. Falls notwendig kann die Peak Window Size noch weiter verringert werden.

### 3. Auswertung

Allgemeine Anweisungen zur automatischen Auswertung können der entsprechenden Anleitung *GeneScan*<sup>®</sup> oder *GeneMapper™ ID Software User's Manual* entnommen werden.

Die Ermittlung der genauen Fragmentlängen der amplifizierten Produkte ist abhängig vom Gerätetyp, von den Elektrophoresebedingungen sowie von dem verwendeten DNA-Längenstandard. Aufgrund der Komplexität einiger STR-Loci sollten möglichst viele, gleichmäßig verteilte Referenzpunkte zur Längenbestimmung herangezogen werden. Hierzu verwenden Sie den DNA-Längenstandard 550 (ROX) mit den Fragmentlängen **50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 500, 525 und 550 bp**.

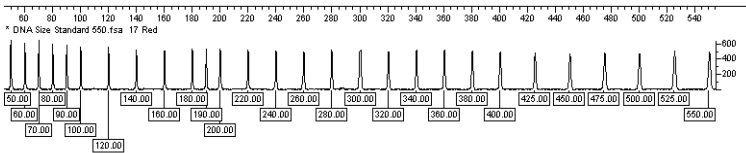

**Abb. 5** Elektropherogramm des DNA-Längenstandard 550 (ROX), Fragmentlängen in bp

**Anmerkung:** Die Grundvorlage des DNA-Längenstandards 550 (ROX) für GeneMapper™ ID Software muss für den Mentype<sup>®</sup> **Nonaplex I** auf 400 bp angepasst werden. Die neue Vorlage kann unter dem Namen SST-ROX\_50-400bp gespeichert und für weitere Analysen verwendet werden.

#### 4. Biotype® Auswertevorlagen

Die Allelzuordnungen der aufgetrennten PCR-Produkte (Genotyping) kann mit Hilfe geeigneter Auswertungssoftware erfolgen, z.B. mit GeneMapper™ ID oder Genotyper® Software in Kombination mit Mentype® **Nonaplex I** Auswertevorlagen der Biotype. Mentype® Auswertevorlagen (Template Files) für GeneMapper™ ID oder Genotyper® Software finden Sie auf unserer Homepage ([www.biotype.de](http://www.biotype.de)) zum Download. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine CD-ROM zu.

Die empfohlenen Biotype® Vorlagen für die GeneMapper™ ID/ID-X Software sind:

Panels	Biotype_Panels_v3a/v3X (Testkit auswählen)	oder höhere Version
BinSets	Biotype_Bins_v3a/v3X	oder höhere Version
Size Standard	SST-ROX_50-500bp (bis 400bp anpassen, Einstellung zuvor beschrieben)	
Analysis Method	Analysis_HID_310 Analysis_HID_3130 Analysis_HID_310_50rfu Analysis_HID_3130_50rfu	
Plot Settings	Plots_4dyes	
Table Settings	Table for 2 Alleles Table for 10 Alleles	

Die Panels und BinSets müssen immer verwendet werden, die weiteren Auswertevorlagen sind optional.

Zusätzliche Biotype® Vorlagen für die GeneMapper™ ID-X Software:

Stutter*	Biotype_Stutter_v3X	oder höhere Version
----------	---------------------	---------------------

\* Beim Laden der oben genannten Panels werden die Stuttereinstellungen nicht akzeptiert, die Stutterdatei muss daher extra importiert werden.

Die empfohlenen Biotype® Vorlagen für die Genotyper® Software sind:

Nonaplex I_v3e	oder höhere Version
----------------	---------------------

#### Allgemeine Vorgehensweise bei der Auswertung

1. Prüfen des Längenstandards (Size Standard)
2. Prüfen der Allelleiter (Allelic Ladder)
3. Prüfen der Positivkontrolle
4. Prüfen der Negativkontrolle
5. Probanddaten auswerten

## 5. Kontrollen

Die im Testkit enthaltene Kontroll-DNA XY1 sowie kommerziell erhältliche DNAs repräsentieren folgende Allele:

**Tabelle 3. Allelzuordnungen mit Mentype® Nonaplex I**

<b>Locus</b>	<b>Kontroll-DNA XY1</b>	<b>ATCC K-562</b>	<b>CCR 9947A</b>	<b>CCR 9948</b>	<b>CCR 3657</b>
Amelogenin	X/Y	X/X	X/X	X/Y	X/Y
D3S1358	17/18	16/16	14/15	15/17	16/18
D8S1179	9/10	12/12	13/13	12/13	15/16
D18S51	12/14	15/16	15/19	15/18	12/20
D21S11	27/28	29/30/31	30/30	29/30	28/29
FGA	20/26	21/24	23/24	24/26	18/23
SE33	17/21.2	26.2/28.2	19/29.2	23.2/26.2	22.2/27.2
TH01	6/9.3	9.3/9.3	8/9.3	6/9.3	7/9.3
VWA	15/18	16/16	17/18	17/17	14/19

In der Tabelle sind die Allele von Referenz-DNA aufgezeigt, die bei ATCC (<http://www.atcc.org/Products/PurifiedDNA.cfm#celllines>) bzw. bei Coriell Cell Repositories (CCR; <http://locus.umdj.edu/nigms>) erhältlich sind. Damit wird den Anforderungen von Szibor et al. (2003) entsprochen.

## 6. Fragmentlängen und Allele

Die in **Tabelle 4** bis **Tabelle 6** angegebenen Werte für Fragmentlängen einzelner Allele beziehen sich auf den DNA-Längenstandard 550 (ROX) und die Messung am ABI PRISM® 310/3130 Genetic Analyzer mit POP-4 Polymer. Unterschiedliche Analysegeräte, DNA Längenstandards oder Polymere können zu anderen Fragmentlängen führen. Es wird empfohlen, bei jedem Lauf einen visuellen Abgleich mit der entsprechenden Allelleiter vorzunehmen.

### Skalierung

Horizontal: 75-405 bp

Vertikal: nach Signalintensität der Proben



Abbildung 6

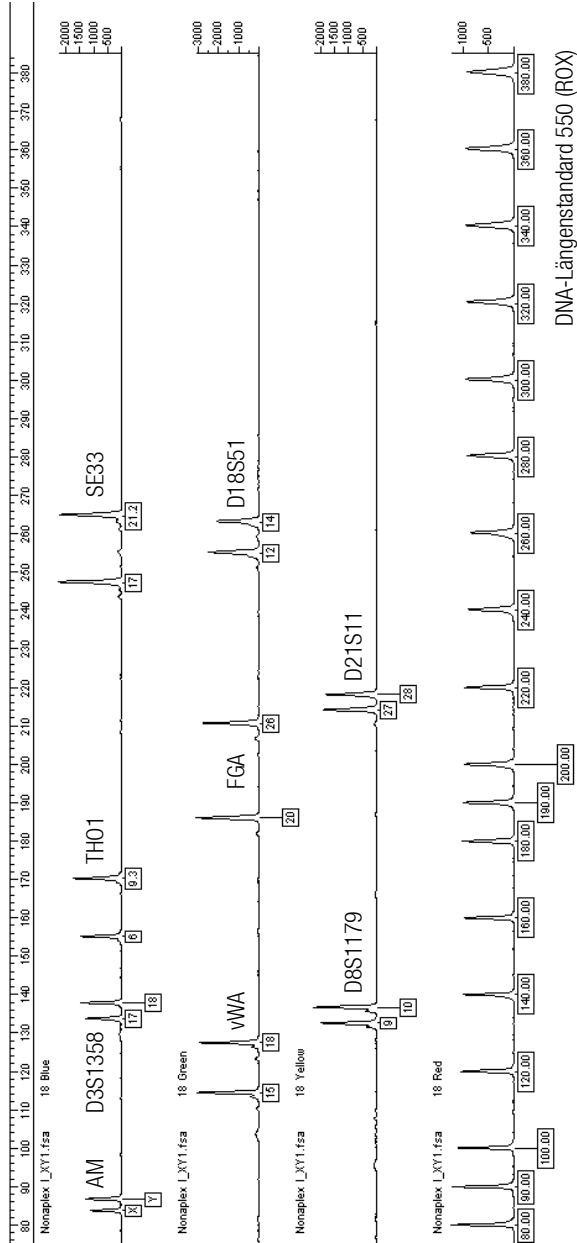


Abb. 6 Elektropherogramm des Mentype® Nonaplex I unter Verwendung von 500 pg Kontroll-DNA XY1. Die Analyse erfolgte am ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer mit dem DNA-Längenstandard 550 (ROX). Die Allelzurordnung wurde mit der Genotype® Software und dem Mentype® Nonaplex I Template File durchgeführt.

Abbildung 7

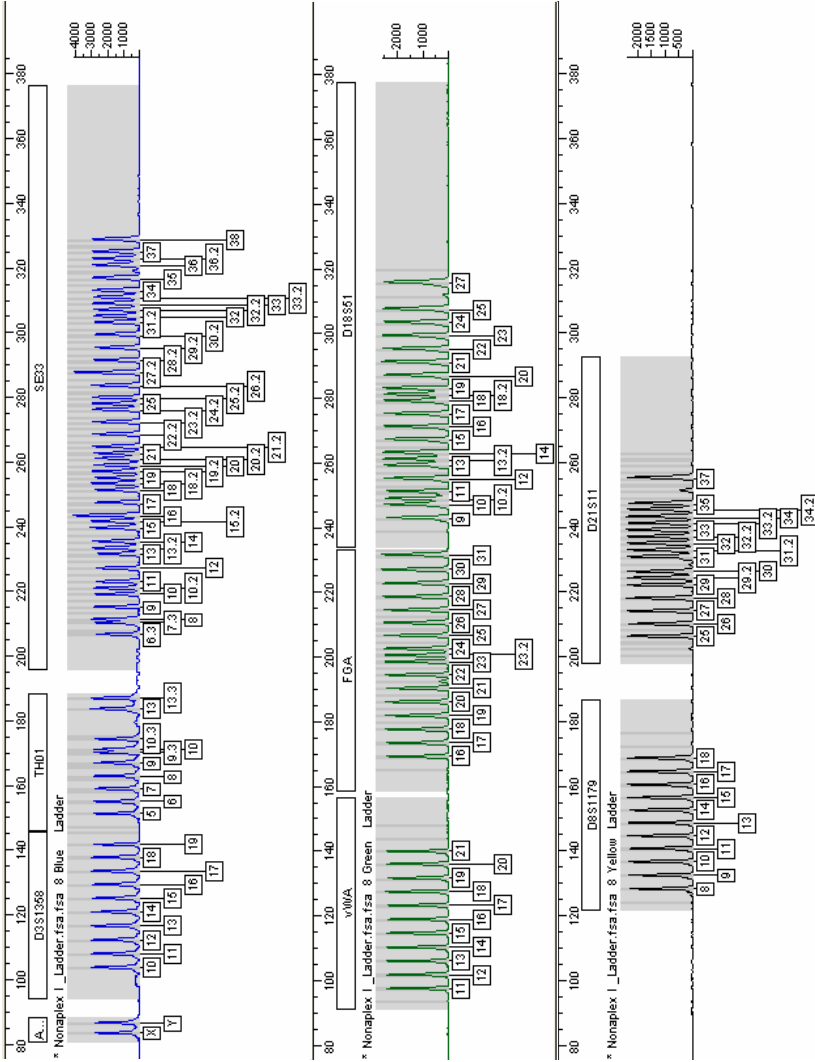


Abb. 7 Elektropherogramm der Allelleiter Mentype® Nonaplex I analysiert am ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer. Die Allelzuordnung wurde mit der Genotyper® Software und dem Mentype® Nonaplex I Template File durchgeführt.

**Tabelle 4. Fragmentlängen der Alleleiter Mentype® Nonaplex I gemessen am ABI PRISM® 310/3130 Genetic Analyzer (blauer Panel)**

Marker/Allel	Größe [bp]*	Weitere Allele**	Marker/Allel	Größe [bp]*	Weitere Allele**	Marker/Allel	Größe [bp]*	Weitere Allele**
<b>Amelogenin</b>	<b>6-FAM</b>		<b>SE33</b>	<b>6-FAM</b>		<b>SE33</b>	<b>6-FAM</b>	
X	83		6.3	207	4.2, 5.3	25	278	
Y	86		7.3	211	7	25.2	280	
			8	212	8.2	26.2	283	26
			9	215	9.2	<b>27.2<sup>‡</sup></b>	287	27
<b>D3S1358</b>	<b>6-FAM</b>		10	219		28.2	291	28, 28.3
10	104	8, 9	10.2	221		29.2	295	29
11	108		11	223	11.2	30.2	299	30
12	112		12	227	12.2	31.2	303	
13	117		13	231		32	305	
14	121		13.2	233	13.3	32.2	307	
15	125		14	235	14.2, 14.3	33	309	
16	130		15	239		33.2	311	
17	134		15.2	241		34	313	34.2
18	138		<b>16<sup>‡</sup></b>	243	16.2, 16.3	35	317	35.2
19	142	20	17	247	17.2, 17.3	36	321	
			18	251		36.2	323	
<b>TH01</b>	<b>6-FAM</b>		18.2	253	18.3	37	325	37.2, 39, 42
5	152	4	19	255		38	329	49
6	155	6.3	19.2	257				
7	159	7.3	20	259	20.1			
8	163	8.3	20.2	261				
9	167	9.1	21	262				
9.3	170		21.2	264				
10	171		22.2	268	22			
10.3	174	11	23.2	272	23			
13	184		24.2	276	24			
13.3	187							

<sup>‡</sup>Diese Allele werden zur besseren Orientierung innerhalb der Alleleiter verstärkt dargestellt.

**Tabelle 5. Fragmentlängen der Allelleiter Mentype® Nonaplex I gemessen am ABI PRISM® 310/3130 Genetic Analyzer (grüner Panel)**

Marker/Allel Größe [bp]*			Marker/Allel Größe [bp]*			Marker/Allel Größe [bp]*		
<b>vWA</b>	<b>HEX</b>	Weitere Allele**	<b>FGA</b>	<b>HEX</b>	Weitere Allele**	<b>D18S51</b>	<b>HEX</b>	Weitere Allele**
11	98	10	16	170	14, 15, 16.1	9	243	8, 9.2
12	102		17	174		10	247	
13	106		18	178	18.2	10.2	249	
14	110		19	182	19.2	11	251	11.2
15	115		20	187	20.2	12	255	12.2
16	119		21	191	21.2	13	259	
17	123		22	195	22.2	13.2	261	
18	128		23	199		14	263	14.2
19	132		23.2	201	23.3	15	267	
20	136		24	203	24.1, 24.2	16	271	16.2
21	140	22, 23, 24	25	207	25.2	17	275	17.2, 17.3
			26	211	26.2	18	279	
			27	215		18.2	281	
			28	219		19	283	19.2
			29	223		20	287	
			30	228	30.2	21	291	21.2
			31	232	31.2	22	295	
						23	299	23.1
						24	303	
						25	308	26
						27	316	28, 29

**Tabelle 6. Fragmentlängen der Alleleiter Mentype® Nonaplex I gemessen am ABI PRISM® 310/3130 Genetic Analyzer (gelber Panel)**

Marker/Allel	Größe [bp]*	Weitere Allele**	Marker/Allel	Größe [bp]*	Weitere Allele**
<b>D8S1179</b>	<b>NED</b>		<b>D21S11</b>	<b>NED</b>	
8	129	7	25	206	23.2, 24, 24.2, 25.2
9	133		26	210	26.2
10	137		27	214	
11	141		28	218	28.2, 28.3
12	145		29	222	
13	149		29.2	224	29.3
14	153		30	226	30.2
15	157		31	231	
16	161		31.2	233	
17	165		32	235	
18	169	19, 20	32.2	237	
			33	239	33.1
			33.2	241	
			34	243	34.1
			34.2	245	
			35	247	35.2, 36, 36.2
			37	255	37.2, 38, 38.2, 39

\* gerundet auf ganze Zahlen

\*\* Diese „off-ladder“ Allele des Biotype DNA Pools werden mit den aktuellen Biotype® Template Files für die Genotyper® oder GeneMapper™ ID Software zugeordnet. Für weitere Allele siehe u.a. [http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/str\\_fact.htm](http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/str_fact.htm)

## 7. Interpretation der Ergebnisse

Durch die vorher beschriebene Auswertung mit automatischer Allelzuordnung wird eine genaue und zuverlässige Unterscheidung der Allele gewährleistet.

### Überstrahlungen (Pull-up Peaks)

Es kann zu Überstrahlungen zwischen den Farbpanels kommen, wenn eine ungeeignete Matrix für die Analyse verwendet wurde oder die Peakhöhen außerhalb des linearen Detektionsbereiches, z.B. größer 3000 relative Fluoreszenzeinheiten (RFU) liegen. Diese erscheinen an der gleichen Position wie spezifische Peaks in anderen Farbpanels (in der Regel mit niedrigeren Signalintensitäten). Um Überstrahlungen zwischen den Farbpanels zu vermeiden, sollten die Peakhöhen daher 3000 RFU nicht wesentlich überschreiten.

### Stotterbanden (Stutter Peaks)

Das Auftreten von Stotterbanden hängt von der Sequenz und Anzahl der Wiederholungseinheiten ab. Bei Tetranukleotid STR Motiven entstehen durch Fehler der Taq DNA Polymerase während der PCR n-4 Peaks, d.h. der Stutterpeak ist 4 Basen kleiner als das wahre Allel. Wiederholungseinheiten werden innerhalb des STR übersprungen. Zur Bewertung der Peaks gelten die Vorgaben der Template Files für die Genotyper<sup>®</sup> und GeneMapper<sup>™</sup> ID Software.

### Template-unabhängige Anheftung von Nukleotiden

Die Taq DNA Polymerase hängt aufgrund ihrer terminalen Transferase-Aktivität bevorzugt ein Adenosin an das 3'-Ende des amplifizierten DNA-Fragments an. Wenn dem PCR-System nicht genügend Zeit für die Extension zur Verfügung steht oder wenn die Primersequenzen die Extension nicht begünstigen, findet diese Anheftung nicht statt. Dieses Artefakt ist durch das Auftreten eines um eine Base verkürzten Fragments (-1 Peak) erkennbar. Alle Biotyper<sup>®</sup> Primer sind so gestaltet, dass diese Artefaktbildung minimiert wird. Zusätzlich wird die Bildung des Artefakts durch den abschließenden Extensionsschritt im PCR-Protokoll (68°C für 60 min) reduziert. Die Peakhöhe des Artefakts nimmt bei hohen DNA-Mengen zu. Zur Bewertung der Peaks sollte jedes Analyzelabor hierfür eigene Grenzwerte festlegen.

### Artefakte

Die Raumtemperatur kann das Laufverhalten der PCR-Produkte an Kapillargeräten stark beeinflussen und bei zu geringer Temperatur zum Auftreten von Schultern oder Doppelpeaks (Split Peaks) führen. Sollten diese Effekte beobachtet werden, empfehlen wir eine erneute Injektion der Proben.

## 8. Referenzen

**Bär W, Brinkmann B, Budowle B, Carracedo A, Gill P, Lincoln P, Mayr W, Olaisen B (1997)** DNA recommendations. Further report of the DNA Commission of the ISFG regarding the use of short tandem repeat systems. *Int. J. Legal Med.* 110: 175-176.

**Szibor R, Edelmann J, Hering S, Plate I, Wittig H, Roewer L, Wiegand P, Cali F, Romano V, Michael M (2003)** Cell line DNA typing in forensic genetics – the necessity of reliable standards. *Forensic Sci. Int.* 138 37-43.